

## データバックアップのお願い

平素は診療支援ソフトウェア「Eveforma」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

パソコンの突然の故障・その他のトラブルにより、作成した患者様の大切なデータが使用不能になるケースもございます。

弊社では、イブフォーマのバックアップ機能で作成されるバックアップフォルダを、USBメモリなどの外部メディアへ定期的に保存することをお勧めしています。

下記手順を参照くださいますようお願い申し上げます。

### ①Eveformaの「バックアップ機能」を実施してください。

メイン画面→[バックアップ] ボタンをクリック  
→[実行] ボタンをクリック



### ②バックアップフォルダがある場所を開いてください。

#### 【Windows】


デスクトップの「Eveforma」アイコンを右クリックし  
→winXPの場合は…「プロパティ」を選択し、「リンク先を探す」を選択  
→win7,8の場合は…「ファイルの場所を開く」を選択

#### 【Mac】

デスクトップの「Eveforma」アイコンを選択  
→メニューバーの「ファイル」を選択  
→「オリジナルを表示」を選択

### ③バックアップフォルダを別メディアにコピーしてください。

「Eveforma」フォルダ内の「Backup」フォルダをUSBメモリなどの外部メディアへ、コピー&ペーストしてください。

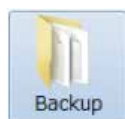

USBメモリ

or



CD-R

or



外付HD



バックアップの方法は、弊社オフィシャルサイトのサポートページ  
「お役立ちコンテンツ」内のムービーでもご覧いただけます！